

ENGU®

**ВЕСЫ ДЕТСКИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
EN-416 BABY**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY.
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием весов.


Внимание:

1. Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
2. Не допускайте попадания воды на весы.
3. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам.
4. Весы предназначены для персонального использования.
5. Рекомендуется производить взвешивание на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
6. Рекомендуется производить взвешивание утром перед приемом пищи.

Установка / замена батареек

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейку. Прибор работает от двух батареек AA (прилагаются). При установке/замене батарейки внимательно следите за соблюдением полярности.

Описание

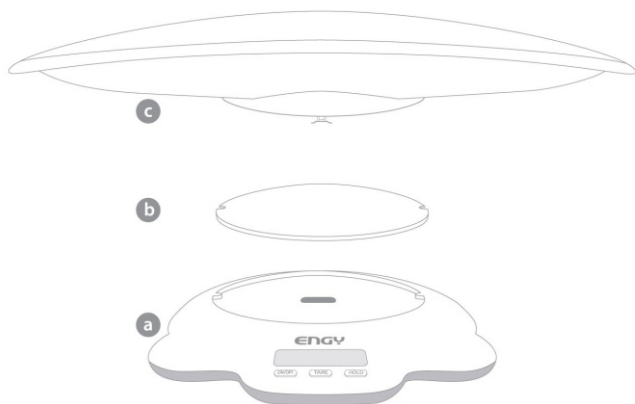


А – База

В – Платформа для взвешивания ребенка/подростка

С – Чаша для взвешивания младенца

Установка платформы/чаши

Для взвешивания младенцев установите чашу С на базу А. Для этого совместите крепление на основании чаши с отверстием на базе. Затем зафиксируйте чашу с помощью переключателя OPEN/CLOSE на обратной стороне базы.

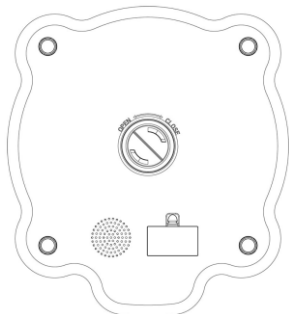

Для взвешивания подростка установите платформу В на базу А. Для этого совместите крепление на основании платформы с отверстием на базе. Затем зафиксируйте платформу с помощью переключателя OPEN/CLOSE на обратной стороне базы.

Для снятия (замены чаши/платформы) сделайте указанные выше действия в обратном порядке.

Использование весов

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или подобные мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Если Вы желаете постелить полотенце перед тем как положить младенца на весы, сделайте это до включения весов.
3. Для включения весов нажмите кнопку ON/OFF.
4. Для выбора единицы измерения веса (кг/фунт) нажмите кнопку ON/OFF еще раз.
5. На дисплее сначала отобразится результат предыдущего взвешивания (либо -, если Вы используете весы впервые), а затем «0.00».
6. Поместите ребенка на весы.
7. Результат взвешивания будет отображен на весах одновременно с надписью «HOLD».
ВНИМАНИЕ: вес ребенка будет показан без учета веса полотенца.
8. После взвешивания уберите ребенка вместе с полотенцем. Весы покажут вес полотенца (с отрицательным значением).
9. Если Вы хотите продолжить взвешивание, нажмите кнопку «TARE». Значение обнулится.

10. Весы отключатся автоматически через 1 минуту. Также весы можно отключить при помощи кнопки ON/OFF.
11. При нажатии кнопки «HOLD» результат взвешивания будет отображаться на весах до тех пор, пока Вы вновь не нажмете кнопку «HOLD».

Возможные неисправности

На дисплее отобразится следующее, если:



- вес превышает максимальный предел, на который рассчитаны весы (50 кг)



следует сменить батарейку

Очистка и уход

- Протирайте весы сухой или слегка влажной тряпочкой без применения чистящих средств.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка – 50 кг.

Точность измерения - 0,01 кг.

Срок службы – 5 лет

Гарантия – 12 месяцев

Товар не подлежит обязательной сертификации

Произведено в Китае

Состав: пластик, металл

Производитель-экспортер: Шэньчжэнь Хэлскээ Электроник Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Зоун Б, 2 Ф/Б Циньхуа Информэйшн Терминал, Норт Зоун оф Хай-Тэк Идастриал Парк, Кеюан Роуд, Наншан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Поставщик-импортер: ООО «Восток»

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.10, лит. Э



По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

ENG Y постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENG Y на территории РФ Вы можете найти на сайте www.skrap.ru

